

2022 Catalogue de Produit



**POP**

*Produits Orthopédiques Professionnels*

*Fournissant des Produits Innovateurs  
de Qualité Incomparable*

Célébrant fièrement plus de 20 ans au service des Canadiens





*Produits Orthopédiques Professionnels*

Produits Orthopédiques Professionnels (POP) est un fournisseur principal de produits orthopédiques, neurologiques, et de médecine sportive partout au Canada depuis 1996

Nous importons et distribuons des marques de haute qualité des États-Unis telle que Medical Specialties, Scotts/CMO, Restorative Medical, Elite Orthopaedics, Orliman, Allard/CSUS et Basko pour en nommer quelques-unes.

Beaucoup de médecins, physiothérapeutes, thérapeutes professionnels et thérapeutes sportifs font confiance et prescrivent nos produits pour leurs patients. En conséquence, nos produits sont utilisés par les athlètes professionnels de la LNH, la NBA et la LCF ainsi que des hôpitaux, des universités et les Forces Armées Canadiennes.

De l'extrémité inférieure à l'extrémité supérieure, nos produits sont reconnus mondialement, comme les chevillères ASO, nous nous engageons à fournir des produits orthopédiques, neurologiques, et de médecine sportive de haute qualité tout en maintenant des hautes normes de service à la clientèle.

Si vous désirez avoir plus d'information sur nos produits ou pour cédule une visite avec nos représentants, veuillez SVP appelez notre bureau sans frais au 1-866-334-4441 ou nous envoyer un courriel à [csr@poportho.com](mailto:csr@poportho.com). Nos représentants dévoués et compétents sont à votre service. Vous pouvez également nous rendre visite en ligne chez [www.poportho.com](http://www.poportho.com).

Merci de votre intérêt et nous espérons vous compter parmi nos clients satisfaits.



Professional Orthopedic Products

## **Table des Matières:**

Aine	7
Bras	6 - 9
Cheville	1 - 2
Dos	6
Épaule	7 - 8
Genou	3 - 6
Main	11 - 12
Pied	2 - 3
Poignet	9 - 12
Torse	7

<b>Province</b>	<b>Représentant</b>	<b>Coordonnées</b>
Alberta/Saskatchewan	Jason Orme Représentant des Ventes	(403) 803-0884 jason.orme1973@gmail.com
Colombie-Britannique	Stephen Bourne Représentant des Ventes	(778) 228-0234 sbourne@poportho.com
Maritimes	Scott Hubley Représentant des Ventes	(902) 471-0301 scott@poportho.com
Terre-Neuve	Patrick Downey Représentant des Ventes	(709) 687-1653 patrick@poportho.com
Ontario Sud-Ouest	Darryl Nequest Représentant des Ventes	(519) 241-2705 dnequest@poportho.com
Québec	Dominic Fafard Représentant des Ventes	(514) 791-4779 dominic@poportho.com
Québec	Jonathan Trottier Représentant des Ventes	(514) 880-7561 jonathan@poportho.com

## Chevillière ASO® EVO®



Sa conception brevetée permet à l'orthèse ASO® EVO® d'offrir un soutien confortable, supérieur à celui de l'orthèse ASO® originale et une meilleure protection contre les entorses de la cheville. Inclut un étrier interne, des courroies externes de stabilisation et un chausson dynamique.

La ASO® EVO® est bilatérale et disponible en Noir et en Blanc, dans les tailles Très-Petit à TT-Grand.

## Chevillière à Laçage Rapide EVO® Speed Lacer™



Inclut l'étrier interne, les courroies externes de stabilisation et le chausson dynamique de l'orthèse EVO®, avec l'ajout d'un mécanisme de laçage rapide qui permet une application plus rapide.

La EVO® Speed Lacer™ est bilatérale et disponible dans les tailles Très-Petit à TT-Grand.

## Chevillière ASO® avec Tiges



Possède les mêmes fonctionnalités que l'orthèse ASO® originale, avec l'ajout de tiges de plastique amovibles qui permettent un meilleur support proprioceptif.

Disponible en Noir et en Blanc, dans les tailles Très-Petit à TT-Grand.

## Chevillière à Laçage Rapide ASO® Speed Lacer



Possède les mêmes fonctionnalités que l'orthèse ASO® originale, avec l'ajout d'un mécanisme de laçage rapide qui permet une application plus rapide.

L'orthèse ASO® à laçage rapide est bilatérale et disponible en Noir et en Blanc, dans les tailles Pédiatrique à TT-Grand.

## Chevillière EVO® Quatro™



Version profilée de l'orthèse EVO®. Idéal pour les athlètes ou les patients qui ne tolèrent pas l'insertion de matériaux volumineux dans la chaussure. Comporte un étrier interne, des courroies externes de stabilisation et un manchon dynamique.

Disponible dans les tailles T-Petit à TT-Grand.

## Chevillière Élastique avec Coussinets de Gel OS6240



Chevillière fermée, faite d'un tricot extensible, respirant. Comporte deux coussinets de gel viscoélastique qui redistribuent la compression de la malléole aux tissus environnants. L'effet massant du tissu compressif et du coussinage stimule une réabsorption plus rapide des contusions et des enflures.

Disponible dans les tailles Petit à Grand.

## Chevillère Élastique Croisée TOB-500N



Support de cheville de type chaussette en matériau élastique doux. Inclut une bande en forme de 8 qui permet d'ajuster la compression et le soutien.

Disponible en Noir et en Beige, dans les tailles T-Petit à T-Grand.

## TGO490 Support Élastique Fonctionnel de la Cheville



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## ACE902 Actius Chevillère Élastique



Fabriqué d'élastique respirante, il est doublé d'un tissu très résistant, doux et extensible, offrant un plus grand confort.

Les indications incluent: ecchymoses et entorses légères; tendinite; processus inflammatoires; soutien et protection lors d'activités sportives et professionnelles.

Disponibles en tailles de Petit à Grand

## Attelle Dorsale de Nuit Phantom



Conception profilée et confortable qui améliore l'observance thérapeutique par le patient. Tiges dorsales internes coussinées qui augmentent ou diminuent le niveau de dorsiflexion. Le matériau antidérapant de la semelle offre une meilleure traction lors des déplacements.

Disponible dans les tailles Petit à TT-Grand.

## Orthèse SafeBoot II



Le talon bridé soulève l'arrière du pied et allège la pression, empêchant ainsi le développement des ulcères du talon et permettant la guérison des ulcères déjà existants. L'orthèse SafeBoot II maintient le pied du patient en dorsiflexion ce qui empêche le pied tombant et les contractures du tendon d'Achille. La barre anti-rotation, lorsqu'elle est tendue soit en médial ou en latéral, empêche toute rotation interne ou externe au niveau de la hanche et prévient ainsi les contractures de la hanche.

Disponible en tailles pour adultes, de Petit à T-Grand, et en tailles Pédiatriques, de 3" à 8".

## Chaussette d'Étiement Elements Stretch-UP



Chaussette pour le traitement de la fasciite plantaire. Maintient une tension sur le fascia plantaire afin qu'il guérisse dans une position tendue pendant la nuit.

Conception bilatérale ; disponible dans les tailles Petit à Grand.

## Orthèse pour Pied Tombant AB100 Boxia Plus



Le Boxia Plus permet aux patients d'être autonomes et indépendants grâce au nouveau système de fermeture semi-automatique à une main afin qu'ils puissent profiter d'une meilleure qualité de vie dans leurs activités quotidiennes. Il existe également des points offrant un effet de massage sur les parties molles. Le système d'ancrage central peut être ajusté au périmètre de la cheville pour garantir la position la plus adéquate pour chaque patient.

Disponible en taille de Petit à Grand

## Botte de Marche Pneumatique FSX



La coquille durable et semi-rigide aide à soutenir le membre tout en offrant une protection complète. Le système de gonflage intégré avec cellules d'air indépendantes en médial et en latéral, empêche d'avoir à utiliser une pompe à air séparée. La semelle berceau profilée permet une démarche naturelle. Inclut un recouvrement d'orteils pour une protection supplémentaire.

Disponible en versions Courte et Longue, dans les tailles Petit à Grand.

## Botte de Marche Fixe Advantage III



Botte de marche pour fracture, extrêmement légère et de résistance supérieure, construite à partir de tiges d'aluminium durables pouvant être formées pour un ajustement personnalisé et d'une doublure en tissu de qualité pour un confort supplémentaire.

Disponible en versions Courte et Longue, dans les tailles Petit à Grand.

## Attelle de Nuit M2



Aide à l'étirement du fascia plantaire avec les courroies bilatérales réglables de dorsiflexion.

Conception bilatérale ; disponible dans les tailles Petit à Grand.

## TGO484 Support Élastique Fonctionnel du Mollet



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## ACE804 Actius Support de Mollet Élastique



Fabrique d'élastique respirante, il est doublé d'un tissu très résistant, doux et extensible, offrant un plus grand confort.

Les indications incluent: pour la protection de l'épine dorsale tibial antérieure; indiqué pour les maladies de muscle; soutien et protection lors d'activités sportives et professionnelles.

Disponible en tailles de Petit à Grand

## Orthèse de Genou Articulée Gripper™ - 12" et 16"



Assure une stabilité médiale et latérale et résiste à la migration distale grâce à un coussin interne Skinloc™. La fermeture antérieure enveloppante permet une facilité d'application et un ajustement optimal. La poplitée ouverte minimise le regroupement des matériaux.

Disponible en CoolFlex en 12" or 16".

Disponible en tailles de Très Petit à 5T-Grand.

## Support de genou Patellavator™



Possède un design unique qui applique une pression variable sur le tendon rotulien sans créer de garrot sur la jambe ni irriter la zone poplitée. La conception profilée élimine les irritations à la jambe opposée.

Disponible en tailles Petit à TT-Grand.

## Stabilisateur Patellaire Dynatrack™ Plus



Le stabilisateur de rotule DynaTrack™ Plus comporte des articulations médiale et latérale en plastique ce qui aide l'orthèse à se conformer au genou pendant la flexion. Un contrefort dynamique, doublé de notre matériau breveté SkinLoc™, exerce une pression constante sur la rotule pendant toute l'amplitude de mouvement du genou. L'ouverture poplitée permet un haut degré de flexion sans inconfort.

Disponible en Néoprène et en CoolFlex.

Disponible en T-Petit à 3T-Grand.

## Stabilisateur Patellaire Dynatrack™



Le DynaTrack™ avec articulations métalliques possède la même conception brevetée que le DynaTrack™ Plus avec l'ajout d'articulations métalliques médiale et latérale, pour une stabilité extraordinaire.

Le DynaTrack™ avec articulations métalliques doit être acheté dans une configuration gauche ou droite. La configuration gauche applique une pression sur la face latérale de la rotule du genou gauche tandis que la configuration droite applique une pression sur la face latérale de la rotule du genou droit.

Disponible dans les tailles T-Petit à TT-Grand.

## OS6211 Élastique avec Stabilisateurs Latéraux



Fabriquée en tricot extensible respirant. Comporte un coussinet viscoélastique et des stabilisateurs médial et latéral pour un meilleur contrôle médial/latéral. Le tissu compressif et le coussinet viscoélastique améliorent la circulation et aident à réduire l'enflure.

Disponible dans les tailles Petit à Grand.

## K80032 Orthèse de Genou Postopératoire Réglable



Conçue pour permettre une amplitude de mouvement contrôlée aux patients qui se remettent d'une chirurgie du genou ou aux personnes souffrant d'instabilité du genou ou d'une blessure. Confortable, simple à appliquer et extrêmement légère. Les barres télescopiques sont facilement réglables pour un ajustement personnalisé. Le verrou à coulisse permet à l'orthèse d'être verrouillée en appuyant simplement sur un bouton. Articulation d'amplitude de mouvement facile à utiliser avec arrêts de flexion et d'extension à ajustement rapide pour contrôler et limiter la flexion et l'extension du genou.

Disponible en Taille Universelle.

**9104 Rodisil Genouillère Élastique- Rotule Fermée**

Le tissu tridimensionnel fournit une compression thérapeutique de 20,33 mm à 36 mm Hg. Le contrefort viscoélastique aide à stabiliser et à masser la rotule pour réduire l'enflure. Les stabilisateurs latéraux métalliques aident à prévenir la migration distale.

Disponible en tailles de Très petit à 4T-Grand.

**9106 Rotule Fermée - Charnières Métalliques**

Le tissu tridimensionnel fournit une compression thérapeutique de 20,33 mm à 36 mm Hg. Les charnières en métal polycentrique bilatérales contrôlent les instabilités médiales et latérales. Le coussin de silicone masse la rotule pour réduire l'enflure.

Disponible en tailles de Très Petit à 4T-Grand.

**Genouillère AKS™ avec Articulations de Plastique**

Les ouvertures distale et proximale facilitent l'application et permettent à la genouillère de s'adapter à différentes formes de patients. Le doux contrefort en forme de fer à cheval peut être repositionné. Le coussinet interne en SkinLoc™ et les articulations de plastique fonctionnent en synergie pour résister à la migration distale et l'amas vertical de matériel.

Disponible dans les tailles T-Petit à 3T-Grand.

**Genouillère AKS™ avec Articulations Métalliques**

Les ouvertures distale et proximale facilitent l'application et permettent d'adapter la genouillère à différentes formes de patients. Le doux contrefort en forme de fer à cheval peut être repositionné. Le coussinet interne en SkinLoc™ et les articulations métalliques fonctionnent en synergie pour résister à la migration distale et l'amas vertical de matériel.

Disponible dans les tailles T-Petit à 3T-Grand.

**ACE803 Genouillère Élastique avec Stabilisateurs**

Fabriqué à partir d'un élastique respirant, il est doublé d'un tissu doux et extensible très résistant qui offre un plus grand confort.

Indiqué pour l'arthrite et l'arthrose, les ecchymoses légères, les processus inflammatoires et support pendant les activités sportives et professionnelles.

Disponible en tailles de Petit à Grand.

**ACE802 Genouillère Élastique**

Fabriqué à partir d'un élastique respirant, il est doublé d'un tissu doux et extensible très résistant qui offre un plus grand confort.

Indiqué pour l'arthrite et l'arthrose, les ecchymoses légères, les processus inflammatoires et support pendant les activités sportives et professionnelles.

Disponible en tailles de Petit à grand.

## "KNEE MATE" KC64-PC Genouillère avec Charnières



De grandes ouvertures confortables de poplites et rotules pour la position et le confort. Conception enveloppante pour une application facile. Des charnières légères couvertes en acier inoxydable, avec arrêt d'hyperextension.

Indiqué pour l'arthrite; Gestion post-opératoire, instabilité croisée antérieure et postérieure légère à modérée et instabilité médiale/latérale; Support général du genou général.

Disponible en tailles de Très Petit à 4T-Grand.

## Genouillère Enveloppante KC64-SL "Super-Lite"



Orthèse de genou "Super Lite" de 7 oz. Fermetures au devant à boucle et crochet avec ouverture poplitée. Sans latex.

Indiqué pour les instabilités de ligament légères; Blessures au ménisque; Support général du genou; phases post-opératoires et de réadaptation; Ostéo-arthrite très légère.

Disponible en tailles Très Petit à 4T-Grand.

## TGO480 Genouillère Élastique avec Bandes



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## TGO487 Genouillère Élastique avec Articulations



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## TGO481 Support Élastique Fonctionnel de la Cuisse



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## ACE801 Support de Cuisse Élastique



Fabriqué d'élastique respirante, il est doublé d'un tissu très résistant, doux et extensible, offrant un plus grand confort.

Les indications incluent: prévention des déchirures musculaires, en particulier dans les quadriceps et les abducteurs; le soutien et la protection pendant les activités sportives et professionnelles.

Disponible en tailles de Petit à Grand

## Support de Maternité Loving Comfort



Confort maximal pour les femmes présentant des symptômes modérés. Le support de maternité Loving Comfort est composé d'une matière élastique légère et ventilée, fraîche et douce contre la peau.

Disponible dans les tailles régulières de vêtements de Petit à Grand.

## Bandage Herniaire Renforcé avec Fermeture Velcro



Ceinture élastique à fermeture velcro et coussinets anatomiques prolongés par des sangles sous les fesses et fixés sur les côtés.

Efficace pour les hernies inguinales latérales (droite ou gauche) et bilatérales réductibles.

Compression et réduction des hernies, maintien et confort optimaux.

Modèles disponible:

B-110: Bilatéral / D-111: Droit / I-112: Gauche

Grandeurs disponible de 70 cm à 120 cm de circonférence de taille.

## Support Sacro-Lombaire Back-n-Black™



La conception brevetée qui comprend des panneaux antérieur et postérieur combinés à des sangles de nylon non élastiques, augmente la pression intra-abdominale, réduisant ainsi la charge sur la colonne lombaire. Les panneaux élastiques aérés améliorent l'observance thérapeutique par le patient.

Disponible en format Régulier, format Court, à Panneaux Doubles ou à Poches Thermiques.

Disponible dans les tailles Petit à 3T-Grand.

## Ceinture Sacro-iliaque (SI)



Ce bandage abdominal spécial est léger, frais et doux contre la peau. C'est le bandage idéal pour un support supplémentaire après une césarienne ou une naissance. Aide la femme à reprendre ses activités normales et à revenir à sa garde-robe plus rapidement.

Assez confortable pour être porté directement sur la peau.

Disponible dans les tailles Petit à Grand.

## EV-300 Support Dorsal Lombaire Semi-Rigide



Orthèse lombo-sacrée fabriquée à partir d'un matériau élastique dense offrant une compression réglable pour un plus grand confinement lombaire. Intégrant un postérieur semi-rigide avec quatre renforts en acier malléable, une technologie de couture sans fil et un coussin lombaire amovible. Comprend également un système de fixation spécialement conçu pour faciliter l'ajustement des patients ayant une dextérité limitée.

Tailles TT-Petit à TT-Grand.

## Support d'Épaule Robuste E-240



Composé de deux sangles élastiques de coton ainsi que de bandes circulaires indépendantes pour chaque épaule. Les sangles exercent une traction progressive sur les épaules, ce qui facilite la correction de la posture cyphotique.

Disponible dans les tailles T-Petit à TT-Grand.

## Immobilisateur d'Épaule



La bandoulière coussinée procure un confort exceptionnel tandis que la courroie ventrale, aussi coussinée, restreint l'abduction et la rotation externe de l'épaule. Les courroies d'épaule et ventrale sont maintenant fabriquées dans un nouveau matériau qui offre une plus grande durabilité et une meilleure résistance à l'étirement. Le nouveau matériau utilisé pour l'écharpe est également plus durable tout en étant très confortable et respirant. La conception bilatérale convient à l'épaule droite et gauche.

Disponible dans les tailles T-Petit à T-Grand ainsi que dans un modèle à Taille Universelle.

## POP ÉCHARPE COUSSINÉE



Conçu pour offrir un niveau optimal de confort et de stabilisation des épaules. Comprend une bandoulière douce et rembourrée, une boucle de pouce, un matériau résistant à l'étirement, léger et respirant. Sans latex

Disponible en tailles de TT-Petit à T-Grand ainsi qu'une taille universelle.

## Écharpe Profilée en Maille de Filet Vission



La forme anatomique unique empêche le bras de glisser dans l'écharpe. La maille de filet ouverte est confortable et procure une respirabilité optimale. Inclut une boucle de support pour le pouce en peluche douce.

Disponible dans les tailles Petit à T-Grand.

## TGO330 Support Élastique Fonctionnel de l'Épaule



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## Coudière Élastique avec Coussinets de Gel OS6230



La compression contrôlée procure un soulagement de la douleur. Les coussinets de gel viscoélastique redistribuent la compression des épicondyles proéminents aux tissus mous environnants et procurent un massage intermittent.

Disponible dans les tailles Petit à Grand.

## Bracelet pour Épicondylite Epitec Fix



Un manchon thermoplastique moulé et formé, garni de perles de silicone qui adhèrent à la peau sans appliquer de pression indue. Le support est conçu pour être facilement réglable et extrêmement confortable à porter.

Disponible en Taille Universelle.

Aussi disponible en couleur vert.

## Orthèse pour Tunnel Cubital



L'orthèse de tunnel ulnaire est une attelle de nuit profilée, qui maintient confortablement le coude dans une position neutre pour le traitement du syndrome du tunnel ulnaire. La conception ventrale, sans matériaux rigides exposés, améliore l'observance thérapeutique par le patient pendant le sommeil. Le renfort en aluminium réglable permet au coude d'être positionné à un angle optimal.

Disponible dans les tailles Petit/Moyen et Grand/T-Grand.

## TGO340 Support Élastique Fonctionnel du Coude



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## Support de Coude EpiGel™



Une conception profilée qui est confortable et aide au traitement du "coude de tennis" (épicondylite latérale) ou du "coude de golfeur" (épicondylite médiale). Le support de coude EpiGel™ procure un soulagement grâce à deux coussinets de gel réglables qui compriment les muscles extenseurs et fléchisseurs sans créer d'effet de garrot à l'avant-bras. Les coussinets de gel doux amortissent également les vibrations. Le système breveté de rétention de la sangle permet une application facile.

Disponible en Taille Universelle.

## ACE401 Support de Coude Élastique



Fabriquée d'élastique respirante, il est doublé d'un tissu très résistant, doux et extensible, offrant un plus grand confort.

Les indications incluent: épicondylite latérale et médiale (coude de tennis); tendinite; ecchymoses légères; processus inflammatoires; soutien et la protection pendant les activités sportives et professionnelles.

Disponible en tailles de Petit à Grand

## Support de Poignet Wrist Lacer™ II de 8"



Le nouveau Wrist Lacer™ II de 8" exerce une tension égale sur les quatre lacets afin de générer facilement une compression uniforme tout au long du support de poignet. La doublure en feutre de polypropylène et le suède perforé permettent à l'humidité de s'évaporer de la peau tandis que le coussinet palmaire bleu offre un support amélioré en épousant la forme de la paume. Les supports d'aluminium dorsal et palmaire sont amovibles pour permettre d'être pliés par un professionnel de la santé pour créer un ajustement sur mesure.

Disponible dans les tailles Pédiatrique jusqu'à TT-Grand.

## Support d'Avant-Bras Lacer II de 10 ½"



Le nouveau support d'avant-bras Lacer II de 10 ½" exerce une tension égale sur les quatre lacets afin de générer facilement une compression uniforme tout au long du support de poignet. La doublure en feutre de polypropylène et le suède perforé permettent à l'humidité de s'évaporer de la peau tandis que le coussinet palmaire bleu offre un support amélioré en épousant la forme de la paume. Les supports d'aluminium dorsal et palmaire sont amovibles pour permettre d'être pliés par un professionnel de la santé pour créer un ajustement sur mesure.

Disponible dans les tailles Petit à T-Grand.

## Support de Poignet-Pouce Ryno Lacer® II Court



Le nouveau Ryno Lacer® II Court procure une tension égale sur tous les lacets pour un confort suprême, une facilité d'application et une mobilisation accrue du poignet et du pouce. La tension peut facilement être ajustée pour les patients présentant une circonférence disproportionnée de l'avant-bras et du poignet. Les renforts d'aluminium dorsal, palmaire et radial sont amovibles pour permettre d'être pliés par un professionnel de la santé pour créer un ajustement sur mesure.

Disponible dans les tailles T-Petit à T-Grand.

## Support de Poignet-Pouce Ryno Lacer® II Long



Le nouveau Ryno Lacer® II Long procure une tension égale sur tous les lacets pour un confort suprême, une facilité d'application et une mobilisation accrue du poignet et du pouce. La tension peut facilement être ajustée pour les patients présentant une circonférence disproportionnée de l'avant-bras et du poignet. Les renforts d'aluminium dorsal, palmaire et radial sont amovibles pour permettre d'être pliés par un professionnel de la santé pour créer un ajustement sur mesure.

Disponible dans les tailles T-Petit à T-Grand.

## Support de Poignet Compressor



La courroie de compression de ce support de poignet assure une compression le long de la région carpienne. Elle travaille conjointement avec les renforts de plastique pour créer un support de poignet fonctionnel qui limite la flexion/extension du poignet. Le système breveté de rétention de la sangle à l'extrémité de la courroie de compression facilite l'application.

Disponible en version Gauche et Droite, dans les tailles Petit à T-Grand.

## Support de Poignet Motion Manager®



Ce support de poignet en néoprène est un excellent choix pour fournir un mouvement fonctionnel. Le support palmaire profilé de plastique et les supports dorsaux multidensité offrent une possibilité d'ajustement pour fournir un niveau optimal de contrôle de la flexion et de l'extension. Une conception profilée permet l'amplitude de mouvement nécessaire pour reprendre le travail en toute sécurité. La conception bilatérale convient à la main gauche et droite.

Disponible dans les tailles T-Petit à T-Grand.

## Support de Poignet 8" Tripod™



En plus de contrôler la flexion/extension, le support de poignet lacé Tripod™ résiste à la déviation radiale/ulnaire. Les baleines ulnaire, palmaire et dorsale en aluminium agissent de concert pour limiter la déviation radiale/ulnaire et minimiser la flexion/extension du poignet. La doublure en feutre de polypropylène et le suède perforé permettent l'évaporation de l'humidité de la peau et améliorent l'observance thérapeutique par le patient. La sangle réglable de pouce permet un mouvement illimité des doigts.

Disponible en version Gauche et Droite, dans les tailles T-Petit à T-Grand, ainsi que dans un modèle à Taille Universelle.

## M760 Immobilisation de Poignet avec Attelle Palmaire



Attelle de poignet fabriquée en velours respirant, fabriquée à partir de matériaux de dernière génération (mousse triple couche, velours, éponge), avec un système d'immobilisation triple comprenant une attelle de paume en aluminium malléable et des bandes médiales-latérales de forme anatomique pour l'adaptation.

Indiqué pour l'immobilisation du poignet; post-traumatisme; post-chirurgie; séquelles douloureuses ou enflées; instabilité; réhabilitation.

Tailles disponible Petit/Moyen et Grand/T-Grand.

## OS6260 - Support de Poignet Élastique



Stabilise, soutient et fournit une compression au poignet. La sangle élastique peut être desserrée ou serrée pour obtenir l'ajustement confortable souhaité.

Conception bilatérale.

Disponible en tailles Petit à Grand

## Support de Poignet Réglable OS6261



Procure un soutien et une compression confortable. La conception bilatérale convient au côté gauche et droit.

Disponible en taille Universelle pour tous les poignets.

## Bande de Poignet Élastique Réglable ACE501



Fabriquée à partir d'élastique respirant, elle est doublée d'un tissu très résistant, doux et extensible, qui procure un plus grand confort. Indiquée pour la prévention des blessures du poignet et tendinites. Offre soutien et protection lors d'activités sportives et au travail.

La conception bilatérale convient au poignet gauche et droit.

Disponible en Taille Universelle pour un inventaire réduit.

## TGO350 Support Élastique Fonctionnel du Poignet



La compression multidirectionnelle fournie empêche l'accumulation de liquide, réduit le stress sur les tissus mous et stimule les propriocepteurs, améliorant ainsi la fonction articulaire et la coordination musculaire. D'autre part, il optimise la circulation sanguine et facilite la régulation de la température corporelle.

Disponible en tailles de T-Petit à T-Grand

## Orthèse de la Main Restorative



Thermoformable pour fournir un léger étirement des articulations et re-former pour ramener progressivement l'articulation à un alignement normal. Exerce un étirement passif prolongé à faible charge pour rallonger les tissus raccourcis. L'orthèse est doublée d'un matériau de régulation de la température « Outlast » afin de ne pas causer de chaleur indésirable.

Les courroies sont codées par couleurs pour faciliter l'application.

Aussi disponible en version modifiée avec une attache dorsale.

Disponible dans les tailles Pédiatriques de Nourrisson à Enfant ainsi que dans les tailles adultes de Petit à Grand.

## POP Gant de Compression pour l'Arthrite



Les Gants de Compression de l'Arthrite POP aident à soulager les douleurs, ainsi que la raideur associée à l'arthrite des mains et des doigts. Nos gants de forme-ajustage fournissent une compression légère qui aide à contrôler l'enflure et la douleur des articulations. La doublure thermique retient la chaleur de votre corps et aide à augmenter la circulation et de apporter un soulagement à long-terme. La paume texturée offre une prise antidérapante et le bout des doigts ouverts est pratique pour les activités quotidiennes, vous permettant de toucher et sentir sans barrières. Sans latex. Vendu par la paire.

Disponible en TT-Petit à TT-Grand.

## Orthèse du Boxeur



L'orthèse du boxeur est facile à ajuster, confortable et offre un soutien supérieur pour améliorer l'observance thérapeutique. Elle est indiquée pour les fractures des quatrième ou cinquième métacarpes. Les bales palmaire et dorsale, en aluminium malléable, sont facilement pliées par un professionnel de la santé pour créer un ajustement personnalisé. Le design en forme de coquille de plastique moulé protège et soutient les quatrième et cinquième métacarpes sans limiter la flexion des articulations métacarpo-phalangiennes.

Disponible dans les tailles Petit à T-Grand.

## Orthèse de Pouce CMCcare



Épouse la forme du premier métacarpien pour stabiliser l'articulation CMC pour un mouvement sans douleur.

L'orthèse CMCcare rétablit l'alignement du pouce pour une fonction améliorée.

Disponible en version Gauche et Droite, dans les tailles Petit à Grand.

## Orthèse de Pouce CMC Manutec Fix Rizart Plus M780



Stabilise l'articulation à la base du pouce et place le premier métacarpien dans sa position fonctionnelle. Place le pouce dans une position anatomiquement correcte et permet aux autres doigts de bouger correctement, assurant ainsi le bon fonctionnement de la main. La conception avec double injection de matériaux et les bords arrondis garantissent un confort d'utilisation maximal. Le système de fixation, sécurisé par un noyau métallique, permet d'ajuster le degré de stabilité de l'articulation trapézo-métacarpienne en fonction des besoins.

Disponible en version Gauche et Droite, dans les tailles Petit à Grand.

## Attelle Aérée pour Immobilisation du Pouce M770



Faite de velours respirant. Se compose d'une attelle en aluminium malléable qui peut être moulée pour offrir un ajustement personnalisé. Sans latex. La conception bilatérale peut être adaptée à la main gauche et à la main droite.

Disponible dans les tailles Petit et Grand.

## Support de Pouce Universel en Suède



Attelle facile à appliquer, confortable et profilée. Le montant en aluminium anatomiquement profilé et les courroies de fermeture élastiques et douces immobilisent confortablement les articulations MP et CMC du pouce.

Conception bilatérale, disponible dans une taille Universelle.

## Protecteur de Pouce TeePee™



Trois montants en aluminium supportent confortablement l'articulation MCP. Chaque montant peut être formé et profilé pour offrir un ajustement personnalisé. Convient au pouce gauche et au droit.

Conception bilatérale, disponible dans les tailles T-Petit à T-Grand.



Produits Orthopédiques Professionnels ont les marques suivantes



Elite Orthopaedics





*Professional Orthopedic Products*

Merci d'avoir choisi Produits Orthopédiques Professionnels pour vos besoins de produits orthopédiques et de médecine sportive. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients. Nous avons assemblé ce document afin de rendre votre expérience de commande chez Produits Orthopédiques Professionnels des plus agréables possible.

### **NOTRE MISSION**

Chez Produits Orthopédiques Professionnels, nous sommes dédiés à fournir des produits orthopédiques et de médecine sportive de haute qualité tout en maintenant des niveaux élevés de service à la clientèle.

### **SERVICE À LA CLIENTÈLE DÉDIÉ**

Téléphone : (514) - 484-4441 Téléphone Sans Frais: 1-866-334-4441  
Télécopieur : (514) - 484-4431 Télécopieur Sans Frais : 1-888-484-4431  
Courriel : [csr@poportho.com](mailto:csr@poportho.com)

Idéalement, toutes les commandes devraient être envoyées par télécopieur ou par courriel afin d'assurer l'exactitude. Pour votre convenance, nous pouvons vous fournir sur demande un exemple de bon de commande en format électronique. Dans la plupart des cas, les commandes reçues avant 15h00 EST sont expédiées le même jour.

### **GARANTIE**

Tous les produits vendus par Produits Orthopédiques Professionnels ont une garantie limitée contre les défauts de matériel ou de fabrication pour une période de six mois à partir de la date d'achat. Avant de renvoyer un produit que vous croyez défectueux, vous devez contacter Produits Orthopédiques Professionnels pour obtenir un numéro d'Autorisation de Retour. Si le produit s'avère être défectueux après inspection, nous le remplacerons sans frais. Cette garantie est limitée aux défauts de matériel ou de fabrication seulement et n'inclut pas les défaillances due à l'usure, lavage incorrect, ou l'essayage impropre. Veillez noter qu'une preuve d'achat datée sera requise. Veillez noter que tous les retours doivent être accompagnés d'une preuve d'achat datée pour avoir droit à un crédit ou à un échange.

### **POLITIQUE DE RETOUR**

Avant de renvoyer ou d'échanger le produit pour des raisons autres qu'un défaut de matériel ou de fabrication, vous devez contacter Produits Orthopédiques Professionnels pour obtenir un numéro d'Autorisation de Retour. Ceci assurera le crédit ou le remplacement prompt et précis. Les retours et les échanges seront seulement acceptés dans les soixante jours de la date de l'achat et seront sujet à des frais de retour de 25%. Les produits faits sur commande, les produits discontinués, les produits qui ont subi des changements dans le matériel ou la conception ou les produits qui ont été usés ne peuvent être retournés ou échangés pour aucune raison autre que l'erreur de Produits Orthopédiques Professionnels. Veillez noter que tous les retours pour des raisons autres qu'un défaut doivent être accompagnés d'une preuve d'achat datée et doivent être retournés avec tout l'emballage original intact pour avoir droit à un crédit ou à un échange.

### **CRÉDITS**

Les crédits vous seront envoyés aussitôt qu'ils seront publiés. Pour votre convenance, nous vous laissons l'opportunité de nous informer comment, et à quelle facture vous voudrez appliquer le crédit.


Encore une fois, merci de votre confiance et nous espérons poursuivre cette longue relation.

**Produits Orthopédiques Professionnels**



Produits Orthopédiques Professionnels

*Fournissant des Produits Innovateurs  
de Qualité Incomparable*

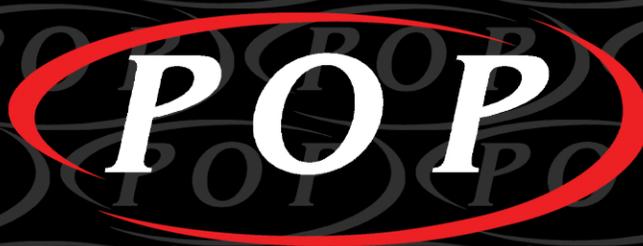

Téléphone 1-866-334-4441 • Télécopieur 1-888-484-4431 • Courriel [csr@poportho.com](mailto:csr@poportho.com)

[www.poportho.com](http://www.poportho.com)